




STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL





PENGUNAAN *TENSIMETER DIGITAL* (*OMRON HBP-1320*)

NOMOR : 517/SPO/KEP/RSIH/XI/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 06 November 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN


Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 517/SPO/KEP/RSIH/XI/2023
Judul Dokumen : PENGGUNAAN *TENSIMETER DIGITAL (OMRON HBP-1320)*
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Septian Mahyat, Amd.Kep	Staf Logistik Keperawatan		6-11-2023
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep.,Ners	Manajer Keperawatan		6-11-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		6-11-2023

<div><div>RUMAH SAKIT</div><div></div><div>INTAN HUSADA</div></div>	PENGUNAAN TENSIMETER DIGITAL (OMRON HBP-1320)		
	No. Dokumen 517/SPO/KEP/RSIH/XI/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 06-11-2023	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div> <div></div> <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	<div>1. Penggunaan <i>tensimeter digital (Omron HBP-1320)</i> adalah suatu cara untuk menilai tekanan darah dan merupakan indikator untuk menilai sistem <i>kardiovaskuler</i> dengan menggunakan <i>tensimeter digital (omron HBP-1320)</i></div> <div>2. Petugas adalah Perawat atau Bidan yang sedang bertugas</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam menggunakan alat <i>tensimeter digital (Omron HBP-1320)</i>		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>1. PENGUNAAN TENSIMETER DIGITAL (OMRON HBP-1320)</div> <div>A. Petugas memastikan alat <i>tensimeter digital (Omron HBP-1320)</i> berfungsi dengan baik.</div> <div></div> <div>B. Petugas menekan tombol [MODE]  untuk menghidupkan alat <i>tensimeter digital (omron HBP-1320)</i>, lalu petugas menekan tombol [MODE] sebanyak 2x untuk merubah ke <i>mode pengukuran</i>. (<i>mode pengukuran akan menunjukan angka 0 pada display</i>)</div>		

C. Petugas memasang manset dengan benar pada lengan pasien

Petugas mensejajarkan tanda arteri "INDEX ▼ ARTERY" dengan arteri brakial dan bagian bawah manset berada pada 1-2 cm diatas bagian dalam sendi sikut.

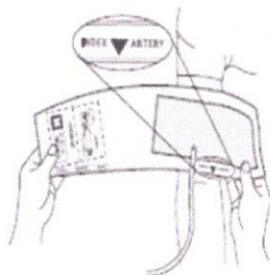

NOTE:

- Pastikan manset terpasang dengan benar, dan sejajar dengan jantung. Perbedaan ketinggian 10 cm (4 inch) dapat mengakibatkan perbedaan tekanan darah 7-8 mmHg

D. Petugas mekan tombol *START/STOP*  untuk memulai pengukuran.

NOTE:

Ada 2 metode pengukuran:

- *Auskultasi manual (reading menggunakan stetoskop)*
- *Otomatis (hasil akan langsung keluar di display setelah selesai proses pengukuran)*

E. Petugas melepas manset pada lengan pasien setelah selesai melakukan tindakan.

(untuk memulai pengukuran baru, tinggal ikuti Langkah-langkah dari awal lagi)

UNIT TERKAIT

1. Divisi Keperawatan