

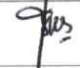
# **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

## **STERILISASI BARANG DENGAN MENGUNAKAN MESIN *AUTOClave***


NOMOR : 069/SPO/OK/RSIH/II/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 09 Februari 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
Nomor Dokumen : 069/SPO/OK/RSIH/II/2022  
Judul Dokumen : STERILISASI BARANG DENGAN MENGGUNAKAN MESIN  
AUTOCLAVE  
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Lia Susilawati, S.Kep, Ners	Kepala Unit Kamar Operasi		09 Feb 2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		09-02-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		9-2-2022

	STERILISASI BARANG DENGAN MENGUNAKAN MESIN AUTOCLAVE		
	No. Dokumen 069/SPO/OK/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 09-02-2022	Ditetapkan oleh:  Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sterilisasi adalah pemusnahan semua mikroorganisme termasuk spora bakteri yang sangat re-sisten</li><li>2. <i>Autoclave</i> adalah mesin yang berfungsi mensterilkan peralatan serta mampu membunuh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur maupun spora yang melekat pada peralatan medis</li><li>3. Barang adalah alat/instrumen dan barang medis habis pakai, alat tenun/linen untuk operasi maupun tindakan medis yang memerlukan proses pensterilan</li><li>4. BMHP adalah bahan medis habis pakai yang digunakan untuk tindakan pelayanan pasien dan harus melalui proses sterilisasi seperti : <i>kassa</i>, kapas</li><li>5. Petugas adalah Petugas CSSD</li></ol>		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk sterilisasi barang dengan menggunakan mesin <i>autoclave</i>		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memasukan air sesuai volume indikator pada wadah penampung <i>autoclave</i></li><li>2. Petugas menata alat dalam rak <i>autoclave</i> di mulai alat yang besar sampai dengan alat yang terkecil dan tersusun rapi</li><li>3. Petugas menutup <i>autoclave</i> dan memastikan <i>safety clamp</i> terkunci rapat</li><li>4. Petugas menyalakan mesin, mengatur waktu dan suhu sterilisasi sesuai jenis alat lalu tekan tombol <i>start</i></li><li>5. Proses sterilisasi berlangsung sekitar 60 menit sampai ada perubahan warna hitam pada <i>indikator tape</i></li><li>6. Petugas segera mematikan mesin dan mengeluarkan Uap dalam pipa mesin tersebut jika alarm mesin sterilisasi sudah berbunyi</li><li>7. petugas segera membuka kunci pada tutup alat tersebut Bila uap panas mesin sterilisasi sudah berkurang</li></ol>		

	<b>STERILISASI BARANG DENGAN MENGUNAKAN MESIN AUTOCLAVE</b>		
	No. Dokumen 069/SPO/OK/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	8. Petugas menelpon ke ruangan untuk segera mengambil instrumen yang ada di Unit Kamar Operasi 9. Jika <i>autoclave</i> tidak digunakan dalam waktu dekat, kosongkan air pada wadah penampung		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Unit Kamar Operasi		