




STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL





PENGUNAAN *INFUS PUMP* (*MINDRAY VP5*)

NOMOR : 519/SPO/KEP/RSIH/XI/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 06 November 2023


LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN


Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 519/SPO/KEP/RSIH/XI/2023
Judul Dokumen : PENGGUNAAN *INFUS PUMP (MINDRAY VP5)*
Nomor Revisi : 00


		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Septian Mahyat, Amd.Kep	Staf Logistik Keperawatan		6-11-2023
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep.,Ners	Manajer Keperawatan		6-11-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		6-11-2023

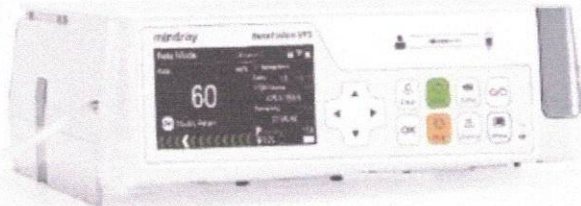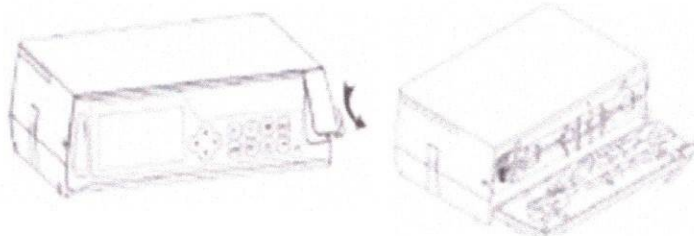	PENGUNAAN INFUS PUMP (MINDRAY VP5)		
	No. Dokumen 519/SPO/KEP/RSIH/XI/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 06-11-2023	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<div>1. Penggunaan <i>infus pump (mindray vp5)</i> adalah suatu alat penunjang kesehatan yang digunakan untuk membantu mengatur tetesan infus dan jumlah cairan yang dibutuhkan secara akurat dalam jangka waktu tertentu</div> <div>2. Petugas adalah Perawat, Bidan atau Pekarya yang sedang bertugas</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam penggunaan alat <i>infus pump (mindray vp5)</i>		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>A. PENGUNAAN INFUS PUMP (MINDRAY VP5)</div> <div>1. Petugas memastikan alat <i>infus pump (mindray vp5)</i> berfungsi dengan baik</div> <div></div> <div>2. Petugas membuka pintu, tekan pegangan untuk membuka klip</div> <div></div>		


3. Petugas memasang cairan infus dan hubungkan infus set ke alat *infus pump*

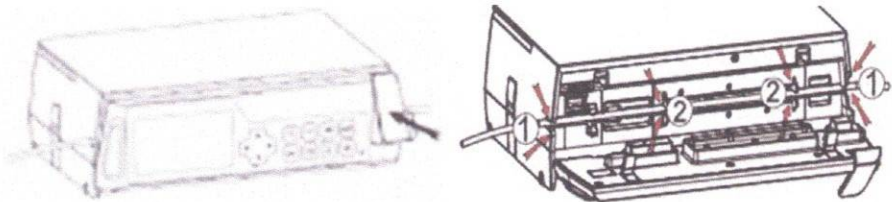

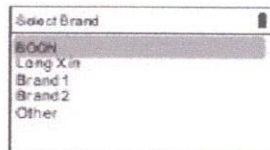

4. Petugas menekan tombol ON/OFF  untuk menyalakan alat *infus pump*
5. Petugas memilih *brand* infus set dan petugas mengkonfirmasi *merk* yang dipilih saat ini sama seperti *merk* infus set yang digunakan

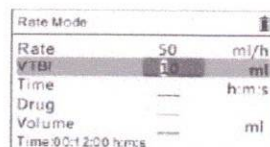

6. Petugas memilih *parameter infusion* yang akan diberikan






- Petugas menekan tombol  untuk *setting* nilai
- Petugas menekan tombol  untuk mengkonfirmasi
- Petugas menekan tombol  untuk membatalkan

7. Petugas menekan tombol *start*  untuk memulai *infusion*

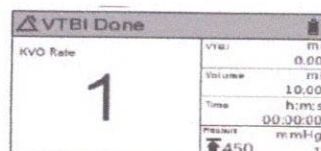

8. Petugas menekan tombol *stop*  untuk menghentikan *infusion/ alarm*, setelah kebutuhan cairan/obat selesai



	PENGUNAAN INFUS PUMP (MINDRAY VP5)		
	No. Dokumen 519/SPO/KEP/RSIH/XI/2023	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	9. Petugas yang akan mengganti cairan infus dilakukan dengan menekan dan tahan tombol <i>ON/ OFF</i>  untuk mematikan alat, kalau tombol <i>ON/OFF</i> ditekan sebentar maka akan memasuki <i>mode standby</i>		
UNIT TERKAIT	1. Divisi Keperawatan		