

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

MEGIRIMKAN HASIL PEMERIKSAAN PASIEN PANORAMIC & CEPHALOMETRI KEPADA DOKTER GIGI PERUJUK

NOMOR

060/SPO/RAD/RSIH/VII/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

05 Juli 2023



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 060/SPO/RAD/RSIH/VII/2023

Judul Dokumen

: MENGIRIMKAN HASIL PEMERIKSAAN PASIEN PANORAMIC &

CEPHALOMETRI KEPADA DOKTER GIGI PERUJUK

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi	PA	05-07-2013
	:	Muhammad Hilmy M, S. Kom	Koordinator PKRS Eksternal	Hay	05.07.2013
Verifikator	:	dr. Rizqi Rosyidah Nur Sp.Rad	Dokter Penanggung Jawab Radiologi	I pm.	05 .07 .20 23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	allin	05.07.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	05.09.2023

Email: rsintanhusada@gmail.com


RUMAH SAKIT	MENGIRIMKAN HASIL PEMERIKSAAN PASIEN PANORAMIC DAN CEPHALOMETRI KEPADA DOKTER GIGI PERUJUK					
INTAN HUSADA	No. Dokumen 060/SPO/RAD/RSIH/VII/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 05-07-2023	Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS				
PENGERTIAN	Mengirimkan hasil pemeriksaan pasien panoramic & cephalometri kepada dokter gigi perujuk merupakan serangkaian tindakan mengirimkan hasil pemeriksaan pasien panoramic dan atau cephalometri melalui <i>WhatsApp</i> yang dilakukan oleh Radiografer kepada Dokter Gigi pengirim rujukan dari luar RS Intan Husada					
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam mengirimkan hasil pemeriksaan pasien Panoramic dan atau Cephalometri kepada Dokter Gigi perujuk					
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien					
PROSEDUR	 A. Alur Pelayanan Pemeriksaan Panoramic & Cephalometri 1. Radiografer menerima permintaan pemeriksaan Panoramic dan atau Cephalometri dari Dokter Gigi rujukan luar 2. Radiografer menginput identitas pasien dan jenis tindakan ke dalam SIMRS 3. Radiografer memanggil pasien ke Ruang Pemeriksaan 4. Radiografer melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari Dokter Gigi yang tertulis pada formulir permintaan pemerksaan 5. Radiografer memposisikan pasien sesuai pemeriksaan yang akan dilakukan 6. Radiografer menginstruksikan pasien untuk ke Subunit Kasir dalam melakukan pembayaran setelah selesai dilakukan pemeriksaan 7. Radiografer melakukan editing hasil gambaran pemeriksaan 8. Radiografer mencetak hasil pemeriksaan melalui WhatsApp kepada Dokter pengirim dengan format gambar jpeg 					



MENGIRIMKAN HASIL PEMERIKSAAN PASIEN PANORAMIC DAN CEPHALOMETRI KEPADA DOKTER GIGI PERUJUK

No. Dokumen 060/SPO/RAD/RSIH/VII/2023 No. Revisi 00 Halaman 2/2

- B. Tata Laksana Mengirimkan Hasil Pemeriksaan Panoramic & Cephalometri Melalui *WhatsApp*
 - 1. Pilih menu File
 - 2. Pilih menu Image
 - 3. Pilih menu Entire Image

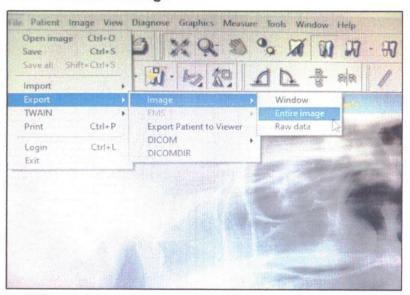

- Hasil gambaran sudah masuk di destkop dan siap untuk dikirmkan kepada Dokter Gigi melalui Whatsapp Web dari nomor kontak Unit Radiologi
- Format pengiriman hasil pemeriksaan dengan Whatsapp Web dilakukan sebagai berikut: "Selamat pagi/siang/sore/malam Dokter, kami dari Unit Radiologi RS Intan Husada mohon izin menyampaikan hasil pemeriksaan panoramic dan atau cephalometric pasien Dokter atas nama, TTL sebagai berikut."

Catatan:

 Apabila pasien dikirim ke Unit Radiologi secara kolektif oleh Staf PKRS Eksternal baik yang berasal dari perusahaan ataupun asuransi, maka hasil pemeriksaan diberikan melalui WhatsApp Unit Radiologi ke Unit PKRS Eksternal

UNIT TERKAIT

- 1. Unit Radiologi
- 2. Unit PKRS Eksternal
- 3. Divisi Pelayanan Medik

Email: rsintanhusada@gmail.com