

# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENGUNAAN *SYRINGE PUMP* (*MINDRAY SP5*)

NOMOR : 518/SPO/KEP/RSIH/XI/2023  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 06 November 2023



## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
Nomor Dokumen : 518SPO/KEP/RSIH/XI/2023  
Judul Dokumen : PENGGUNAAN SYRINGE PUMP (MINDRAY SP5)  
Nomor Revisi : 00


		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Septian Mahyat, Amd.Kep	Staf Logistik Keperawatan		6 - 11 - 2023
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep.,Ners	Manajer Keperawatan		6 - 11 - 2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		6 - 11 - 2023

	<b>PENGUNAAN SYRINGE PUMP (MINDRAY SP5)</b>		
	No. Dokumen 518/SPO/KEP/RSIH/XI/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit: 06-11-2023	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  <b>drg. Muhammad Hasan, MARS</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	<div>1. Penggunaan <i>syringe pump (mindray sp5)</i> adalah suatu alat penunjang kesehatan yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu secara teratur</div> <div>2. Petugas adalah Perawat atau Bidan yang sedang bertugas</div>		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam penggunaan alat <i>infus pump (mindray sp5)</i>		
<b>KEBIJAKAN</b>	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
<b>PROSEDUR</b>	<div><b>A. PENGUNAAN SYRINGE PUMP (MINDRAY SP5)</b></div> <div>1. Petugas memastikan alat <i>syringe pump (mindray sp5)</i> berfungsi dengan baik</div> <div></div> <div>2. Petugas membuka pintu, tekan pegangan untuk membuka klip, lalu gerakan penggeser ke posisi yang sesuai. Tarik keluar <i>holder</i> dan putar kekanan</div> <div></div>		


3. Petugas memasang *syringe* beserta aksesorisnya.

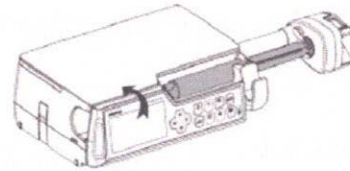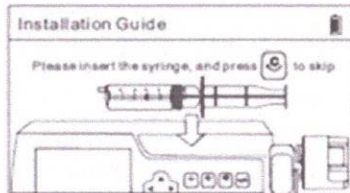

4. Petugas menekan tombol ON/OFF untuk menyalakan alat  
5. Petugas memilih *brand syringe* dan petugas mengkonfirmasi *merk* yang dipilih saat ini sama seperti *merk syringe* yang digunakan

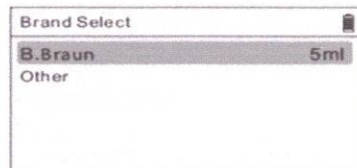


6. Petugas memilih parameter *infusion* yang akan diberikan

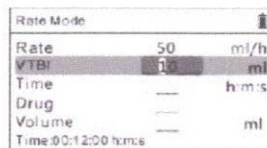


- Petugas menekan tombol untuk *setting* nilai
- Petugas menekan tombol untuk mengkonfirmasi
- Petugas menekan tombol untuk membatalkan

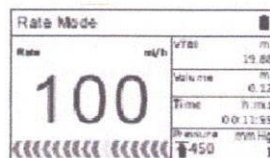

7. Petugas menekan tombol *start* untuk memulai *infusion*

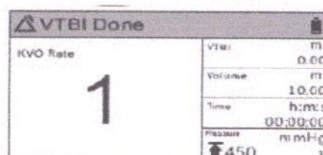

8. Petugas menekan tombol *stop* untuk menghentikan *infusion/ alarm*, setelah kebutuhan cairan/obat selesai





	<b>PENGUNAAN SYRINGE PUMP (MINDRAY SP5)</b>		
	No. Dokumen 518/SPO/KEP/RSIH/XI/2023	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	9. Untuk mengganti cairan/ obat,petugas menekan dan tahan tombol <b>ON/OFF</b>  untuk mematikan alat, kalau tombol <b>ON/OFF</b> ditekan sebentar maka akan memasuki <i>mode standby</i>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Divisi Keperawatan		