

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

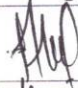
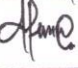



PENGUNAAN SURGICAL *CLIPPER*



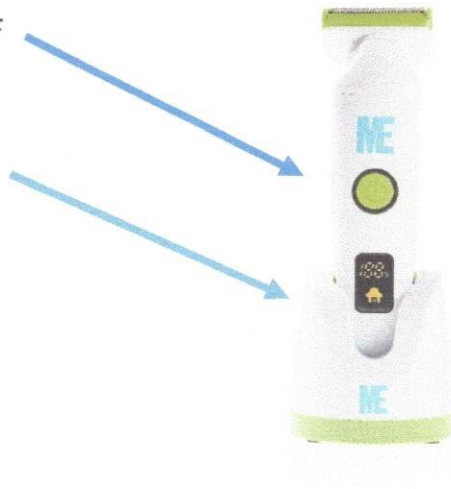
(ME)

NOMOR : 531/SPO/KEP/RSIH/IV/2024
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 04 April 2024

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 531/SPO/KEP/RSIH/IV/2024
 Judul Dokumen : PENGGUNAAN SURGICAL CLIPPER (ME)
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Septian Mahyat, Amd.Kep	Staf Logistik Keperawatan		4 - 4 - 2024
	:	Ana Restiana Dewi, S.Kep, Ners	Infection Prevention Control Nurse		4 - 4 - 2024
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep, Ners	Manajer Keperawatan		4 - 4 - 2024
	:	dr. Tena Rosmiati I, Sp.PK	Ketua Komite PPI		4 - 4 - 2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		4 - 4 - 2024

<div><div>RUMAH SAKIT</div><div></div><div>INTAN HUSADA</div></div>	PENGUNAAN SURGICAL CLIPPER (ME)		
	No. Dokumen 531/SPO/KEP/RSIH/IV/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 04-04-2024	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div> <div></div> <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	<div>1. Penggunaan <i>surgical clipper (ME)</i> adalah suatu alat penunjang kesehatan yang digunakan untuk mencukur rambut/bulu di Rumah Sakit, sebelum operasi atau sebelum pemasangan alat</div> <div>2. Petugas adalah perawat atau bidan yang sedang bertugas</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam penggunaan alat <i>surgical clipper (ME)</i>		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>A. PENGUNAAN SURGICAL CLIPPER (ME)</div> <div>1. Petugas memastikan alat <i>surgical clipper (ME)</i> berfungsi dengan baik.</div> <div><div><div>Tombol On/OFF</div><div>Indikator LED</div></div><div></div></div> <div>2. Petugas memastikan indikator digital <i>LED</i> menyala hijau, ketika indikator berkedip merah maka pengisian daya di perlukan</div> <div>3. Petugas menekan tombol ON/OFF diatas indikator baterai <i>LED</i> untuk menyalakan alat, maka indikator akan menyala</div> <div>4. Petugas memegang alat <i>surgical clipper (ME)</i> dengan posisi datar hingga sedikit miring ke kulit, untuk hasil terbaik pencukuran:</div>		

PENGUNAAN SURGICAL CLIPPER (ME)

No. Dokumen
531/SPO/KEP/RSIH/IV/2024

No. Revisi
00

Halaman
2/3

- a. Petugas mencukur secara berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut



- b. Petugas meregangkan kulit hingga kencang saat mencukur rambut pada area kulit yang berkontur
c. Petugas dapat memutar 45° bagian kepala alat *surgical clipper* (ME) ke kiri dan ke kanan serta di kunci agar dapat menjangkau area pencukuran yang sulit di jangkau



B. PEMASANGAN BLADE/MATA PISAU SURGICAL CLIPPER (ME)

1. Petugas memastikan alat surgical clipper dalam keadaan mati atau **OFF**
2. Petugas membuka tutup kemasan *blade/mata pisau surgical clipper* (ME) tanpa menyentuh mata pisau



3. Petugas memegang badan alat *surgical clipper* (ME) di atas *blade/mata pisau*

	PENGUNAAN SURGICAL CLIPPER (ME)		
	No. Dokumen 531/SPO/KEP/RSIH/IV/2024	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	<p>4. Petugas memasang <i>blade</i>/mata pisau dengan cara mengeser ke dalam posisi yang ada di alat <i>surgical clipper (ME)</i> sampai berbunyi <i>klik</i></p>  <p>C. PENGISIAN DAYA ALAT SURGICAL CLIPPER (ME)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memastikan alat <i>surgical clipper (ME)</i> dalam keadaan mati atau OFF 2. Petugas membersihkan alat <i>surgical clipper (ME)</i>, memastikan pengisi daya bersih dan bebas dari rambut atau kontaminasi lainnya, sebelum mengisi daya 3. Petugas menyambungkan kabel pengisi daya ke <i>stopkontak</i> dan memastikan kabel tidak terjepit atau melipat 4. petugas menempatkan alat <i>surgical cliper (ME)</i> ke bagian pengisian daya hingga terisi penuh, sampai indikator di layar LED menunjukkan angka 100% 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Keperawatan 2. Komite PPI 		