

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

MENGAKSES HASIL PEMERIKSAAN PANORAMIC DAN CEPHALOMETRI OLEH POLIKLINIK GIGI

NOMOR

061/SPO/RAD/RSIH/VII/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 05 Juli 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 061/SPO/RAD/RSIH/VII/2023

Judul Dokumen

: MENGAKSES HASIL PEMERIKSAAN PANORAMIC DAN

CEPHALOMETRI OLEH POLIKLINIK GIGI

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi	P	5-7.2013
	:	Elis Dida Junica, Amd. Kep	Kepala Unit Rawat Jalan	E.	5.7.2023
Verifikator	:	dr. Rizqi Rosyidah Nur Sp.Rad	Dokter Penanggung Jawab Radiologi	4 pri.	.5.7.2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	John	5.2.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	h.	5.7.2023


MENGAKSES HASIL PEMERIKSAAN PANORAMIC DAN RUMAH SAKIT CEPHALOMETRI OLEH POLIKLINIK GIGI Halaman No. Revisi No. Dokumen 1/2 00 061/SPO/RAD/RSIH/VII/2023 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur. Tanggal Terbit: STANDAR 05-07-2023 **PROSEDUR OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS PENGERTIAN Mengakses hasil pemeriksaan panoramic & cephalometri oleh klinik gigi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi atau perawat gigi melalui sistem ClinicView 11.9 untuk melihat hasil pemeriksaan pasien panoramic atau cephalometri yang dirujuk dari poliklinik gigi Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam mengakses hasil TUJUAN pemeriksaan pasien Panoramic dan Cephalometri dari poliklinik gigi Husada Nomor **KEBIJAKAN** Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien PROSEDUR 1. Radiografer menerima formulir permintaan pemeriksaan Panoramic atau Cephalometri dari pasien klinik gigi 2. Radiografer melakukan konfirmasi tindakan pemeriksaan melalui SIMRS 3. Radiografer memanggil pasien ke Ruang Pemeriksaan 4. Radiografer melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari Dokter Gigi 5. Radiografer memposisikan pasien sesuai pemeriksaan yang akan 6. Radiografer melakukan editing hasil gambaran pemeriksaan 7. Radiografer mencetak hasil pemeriksaan 8. Radiografer menyimpan hasil pemeriksaan pada sistem ClinicView 11.9 dengan format nama lengkap pasien-tanggal pemeriksaan bulan pemeriksaan - tahun pemeriksaan 9. Poliklinik Gigi dapat mengakses hasil pemeriksaan pasien pada sistem ClinicView 11.9 untuk hasil pemeriksaan yang telah disimpan dengan cara pilih menu open pada kolom patient kemudian masukkan nomor rekam medis pasien pada kolom Patient ID


Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

MENGAKSES HASIL PEMERIKSAAN PANORAMIC DAN CEPHALOMETRI OLEH POLIKLINIK GIGI

No. Dokumen 061/SPO/RAD/RSIH/VII/2023 No. Revisi 00 Halaman 2/2

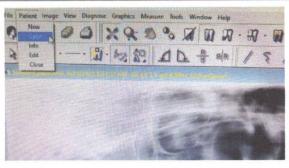

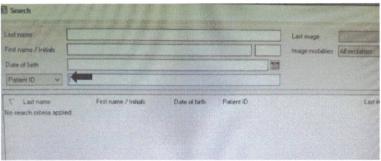

UNIT TERKAIT

- 1. Unit Radiologi
- 2. Unit Rawat Jalan
- 3. Divisi Pelayanan Medik

Email: rsintanhusada@gmail.com