

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PENGEMASAN DAN PROSES STERILISASI ALAT KESEHATAN

NOMOR : 066/SPO/OK/RSIH/II/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 09 Februari 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 066/SPO/OK/RSIH/II/2022
Judul Dokumen : PENGEMASAN DAN PROSES STERILISASI ALAT KESEHATAN
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Lia Susilawati, S.Kep, Ners	Kepala Unit Kamar Operasi		09 Feb 2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		09/02/2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		9-2-2022


	PENGEMASAN DAN PROSES STERILISASI ALAT KESEHATAN		
	No. Dokumen 066/SPO/OK/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 09-02-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	1. Proses Pengemasan alat adalah suatu kegiatan untuk membungkus alat/instrumen yang sudah bersih dan kering setelah proses sterilisasi dengan jenis pembungkus sebagai berikut : a. Pouches (pembungkus jenis kertas dan plastik) b. Kertas wrap (<i>medical duk</i>) c. Linen (sesuai dengan kebutuhannya dan keperluannya) 2. Petugas adalah Petugas CSSD		
TUJUAN	Sebagai acuan dan penerapan langkah-langkah dalam melakukan proses pengemasan dan sterilisasi alat kesehatan		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	1. Petugas melakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan <i>Handrub</i> 2. Petugas menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari masker, sarung tangan dan penutup kepala 2. Petugas melakukan <i>double cheklis</i> terhadap instrumen dari masing-masing unit 3. Petugas menyusun instrument sesuai dengan <i>pack</i> satuan/set instrument sesuai permintaan 4. Petugas menyiapkan alat pengemasan sebagai berikut : a. <i>Pouches</i> 1) Petugas memotong <i>pouches</i> disesuaikan dengan besar alat yang akan dimasukkan 2) Petugas memberikan segel pada setiap kemasan dengan cara melakukan laminating pada bagian pinggir atas dan pinggir bawah kemasan selebar 3 – 15 mm dan bagian atas diberi jarak 10 cm 3) Petugas memasang <i>indicator tape</i> pada kemasan <i>pouches</i> dilengkapi dengan tanggal pensterilan dan tanggal <i>expired</i>		

PENGEMASAN DAN PROSES STERILISASI ALAT KESEHATAN

No. Dokumen
066/SPO/OK/RSIH/III/2022

No. Revisi
00

Halaman
2/3

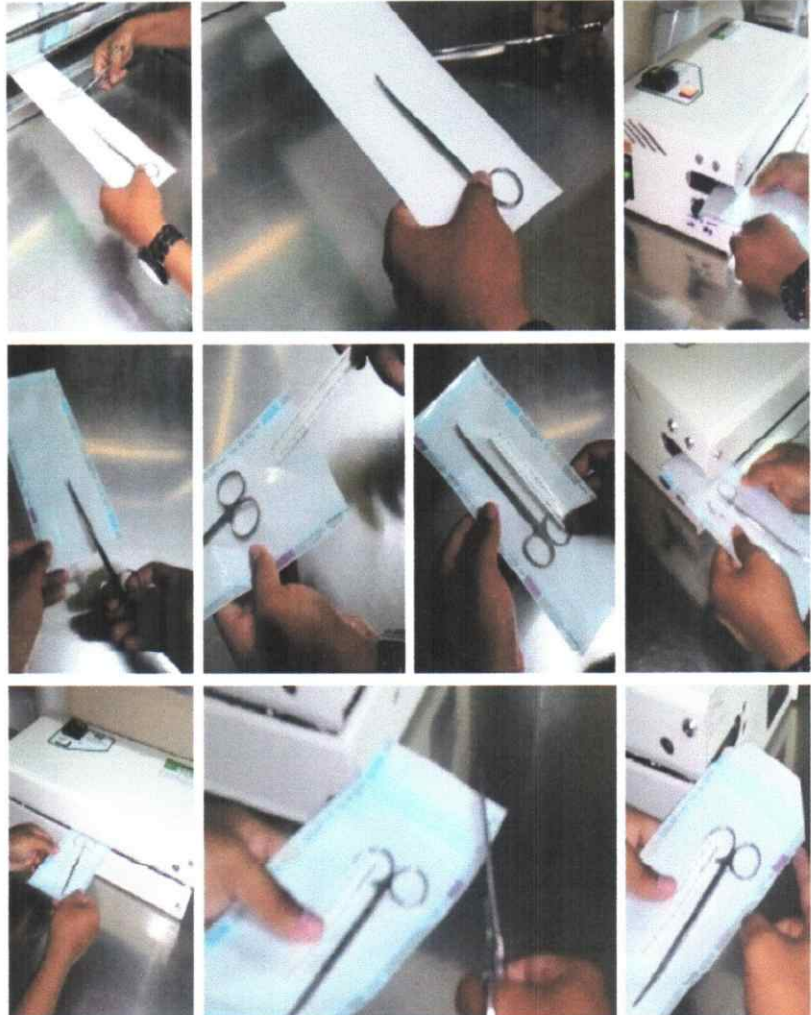

(cara segel proses *packing*/pengemas menggunakan *pouches*)

b. *Medical duk*






- 1) Petugas membungkus instrument dengan *medical duk* 2 lapis di meja yang bersih
- 2) Petugas memberi Label *indicator tape* sesuai dengan nama alat, tanggal penseterilan, *expired* dan nama ruangan (*expired* alat 7 hari setelah proses sterilisasi)

PENGEMASAN DAN PROSES STERILISASI ALAT KESEHATAN

No. Dokumen
066/SPO/OK/RSIH/II/2022

No. Revisi
00

Halaman
3/3

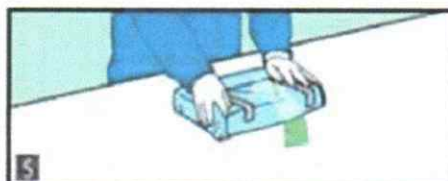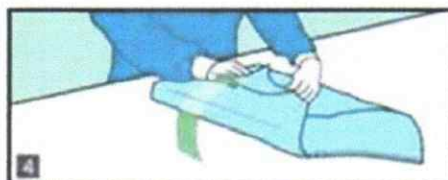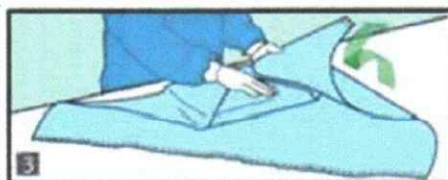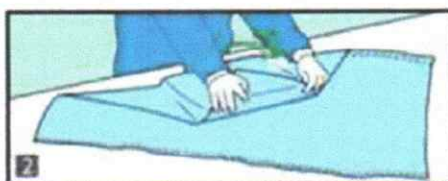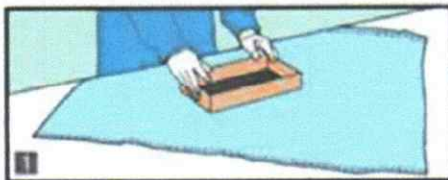

(cara melipat dalam proses packing/membungkus alat menggunakan *medical duk*)

5. Petugas menyusun alat medis yang sudah dikemas dan memasukkannya ke dalam mesin sterilisasi *autoclave*

UNIT TERKAIT

1. Unit Kamar Operasi