

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

MENDAMPINGI PEMERIKSAAN THE TEST OF VARIABLES OF ATTENTION (TOVA) DI UNIT RAWAT JALAN

NOMOR : 025/SPO/RAJAL/RSIH/I/2023

NO. REVISI : 00

TANGGAL PENGESAHAN : 26 Januari 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 025/SPO/RAJAL/RSIH/X/2022

Judul Dokumen

: MENDAMPINGI PEMERIKSAAN THE TEST OF VARIABLES OF

ATTENTION (TOVA) DI UNIT RAWAT JALAN

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	M. Rival Juliana, A.Md.Kep	Perawat Rawat Jalan	(Ibhil	26/ - 25
	***	Elis Dida Junica, A.Md.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan	if if	26-01-23
Verifikator		dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	alle	01 - 23
		Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Black	26/01/25
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	26/01/23

Email: rsintanhusada@gmail.com


MENDAMPINGI PEMERIKSAAN THE TEST OF VARIABLES RUMAH SAKIT OF ATTENTION (T.O.V.A) DI UNIT RAWAT JALAN Halaman No. Revisi No. Dokumen 1/3 00 025/SPO/RAJAL/RSIH/I/2022 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur. STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 25-01-2023 **OPERASIONAL** drg, Muhammad Hasan, MARS Mendampingi pemeriksaan The Test of Variables of Attention (TOVA) di PENGERTIAN Unit Rawat Jalan adalah kegiatan yang dilakukan dapat membantu memberi gambaran klinis gangguan hiperaktivitas dan pemusatan perhatian dan gangguan atensi lainnya dalam memantau kemajuan terapi The Test of Variables of Attention (TOVA) adalah bentuk continuous performance test berbasis komputer yang dapat membantu mendeteksi, mendiagnosis dan memonitor efektivitas terapi pada gangguan atensi (perhatian) secara objektif dengan pengemasan test seperti permainan komputer yang mudah dilakukan oleh anak-anak dan dewasa, dari usia 4-80 tahun Perawat adalah Tenaga Kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan psikometri Petugas adalah Perawat yang sedang bertugas TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah Mendampingi pemeriksaan The Test of Variables of Attention (TOVA) di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Intan Husada KEBIJAKAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien PROSEDUR Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien dan menjaga privasi pasien 2. Petugas melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan Tindakan 3. Petugas melakukan pengkajian kepada pasien 4. Petugas menjelaskan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan kepada pasien Petugas menyiapkan alat sebagai berikut :



MENDAMPINGI PEMERIKSAAN THE TEST OF VARIABLES OF ATTENTION (T.O.V.A) DI UNIT RAWAT JALAN

No. Dokumen 025/SPO/RAJAL/RSIH/I/2022 No. Revisi 00 Halaman 2/3

- a. Laptop
- b. Printer
- c. Tombol TOVA Test
- Petugas mempersilahkan Pasien untuk duduk di tempat yang sudah disediakan
- 7. Petugas menjelaskan tata cara TOVA Test
- 8. Petugas menjelaskan waktu latihan tes selama 5 menit
- 9. Petugas menjelaskan waktu tes selama 20 menit
- 10. Petugas menyiapkan alat TOVA Test sebagai berikut :
 - a. Petugas menghidupkan laptop dan printer dengan menekan tombol power dan akan langsung muncul aplikasi TOVA
 - b. Petugas menekan tombol alt + F untuk mengakses menu File
 - c. Petugas memilih New Subject kemudian menekan enter
 - d. Petugas menginput identitas pasien
- Petugas mengarahkan pasien untuk duduk dikursi yang telah disediakan
- Petugas memberikan contoh kepada pasien dan pasien melakukan percobaan test (trial) sebagai berikut:
 - a. Petugas menekan tombol alt + T untuk mengakses menu Test
 - b. Petugas memilih menu Visual Practice Test
 - c. Petugas memberikan alat Tombol TOVA Test kepada pasien
 - d. Petugas menjelaskan kepada pasien untuk menekan tombol Ketika melihat gambar kotak hitam yang muncul di monitor dengan ketentuan:
 - Tekan tombol apabila kotak hitam muncul di bagian atas titik tengah
 - Jangan tekan tombol apabila kotak hitam muncul di bagian bawah titik tengah
 - Petugas memulai percobaan test (Trial) dengan menekan tombol enter
- 13. Petugas menanyakan kembali kepada pasien untuk kesiapan test
- Petugas memulai test dengan menekan tombol alt + T untuk mengakses menu Test
- 15. Petugas memilih menu Visual Test
- 16. Petugas menekan tombol enter untuk memulai test
- 17. Petugas mengobservasi selama test berlangsung
- 18. Petugas mencatat nama file (kode test) Ketika pasien selesai
- 19. Petugas memilih kolom simpan
- Pasien dipersilahkan untuk menunggu hasil TOVA Test atau diperbolehkan pulang dan hasil akan diambil pada saat konsultasi kepada Dokter
- 21. Petugas melakukan analisa data test dengan cara sebagai berikut:

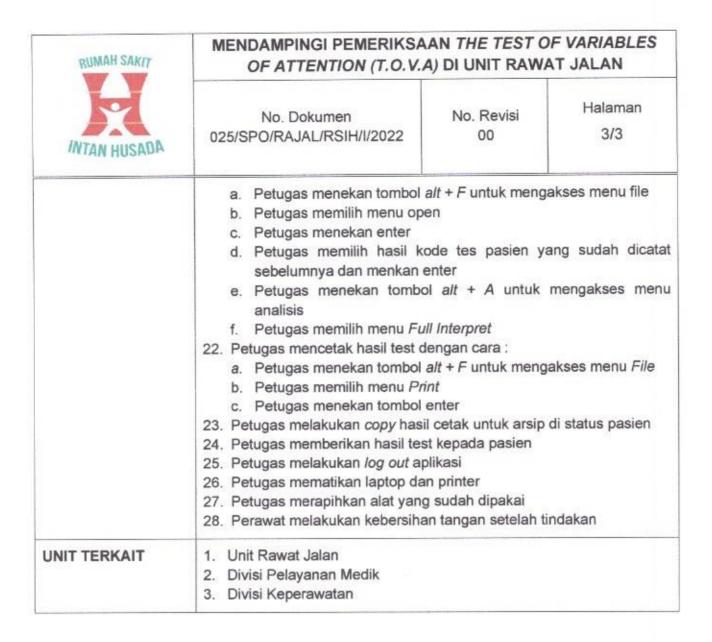

Email: rsintanhusada@gmail.com