

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN CPAP (CONTINUES POSITIVE AIRWAY PRESSURE)

NOMOR

: 015/SPO/IA/RSIH/XI/2022

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 29 November 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 014/SPO/IA/RSIH/XI/2022

Judul Dokumen

: PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN CPAP (CONTINOUS POSITIVE

AIRWAY PRESSURE).

Nomor Revisi

: 00


		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Fauziah, A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Anak	Fawlie	29-11-2022
	•	dr. Gustomo Panantro, Sp.A	Kepala Penanggung Jawab Unit Intensif Anak	Ok	29-(1.262
Verifikator		Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Velent	20-11-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Whii-	29-11-202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	þ.	29-11-2022

RUMAH SAKIT	PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN (CPAP) CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 015/SPO/IA/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/3		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 29-11-2022	Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS			
PENGERTIAN	yang berfungsi mempertaha Bayi Baru Lahir selama pern Indikasi penggunaan CPAP a. Bayi dengan RDS (resp b. Bayi dengan TTN (trans c. Bayi dengan aspirasi me d. Bayi yang menderita api e. Bayi dengan paralisis di f. Bayi dengan penyakit s bronkhiolitis	i dengan RDS (respirasi distress syndrom) i dengan TTN (transient tachypnea of the newborn) i dengan aspirasi mekonium i yang menderita apnea of prematurity i dengan paralisis diafragma i dengan penyakit saluran nafas seperti trakeomalacia dan			
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemberian oksigen melalui CPAP (continues posititive airway pressure)				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien				
PROSEDUR	Petugas memastikan form CPAP sudah ditandatangan saksi pihak keluarga pasien Petugas mengucapkan sala identifikasi pasien Petugas melakukan kebersi Petugas menyiapkan perala	i oleh pasien/penang , dokter dan saksi pih m, memperkenalkan han tangan sesuai sta	gung jawab pasien, ak rumah sakit diri dan melakukan		

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN (CPAP) CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE

No. Dokumen 015/SPO/IA/RSIH/XI/2022 No. Revisi 00 Halaman 2/3

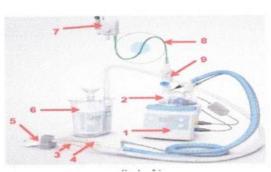

- a. Humidifier (1): terdiri dari control dan display panel, heater plate, pinger guard, colour coded sockets (penghubung probe sensor dan adaptor). Humidifier berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara
- b. Humidification Chamber (2): tempat untuk menahan udara
- c. Expiratory limb (breathing sircuit) (3): untuk membawa udara ekspirasi ke CPAP generator
- d. Inspiratory Limb (breathing sircuit) (4): untuk membawa gas yang telah dilembabkan dan dihangatkan ke pasien
- e. Infant interface (5): alat yang melekat ke hidung pasien berupa nasal prong atau infant mask
- f. CPAP generator (6): untuk mempertahankan tekanan rata-rata dari CPAP
- g. Oxygen blender (mixer) (7): untuk mencampur oksigen sesuai dengan yang dibutuhkan
- h. Oxygen Tubing (8): untuk membawa oksigen ke humidifier
- i. Presur manifold (9): untuk membatasi tekanan 17 cm udara 8 liter permenit
- 5. Petugas menyiapkan alat dan aksesoris yang akan dipakai
- 6. Petugas memasangkan *chamber ke humidifier base* dan lepaskan tutup plastik
- 7. Petugas menyambungkan *pressure manifold*, selang nafas, *temperature probe* dan *heater wire* adaptor
- 8. Petugas mengisi air steril ke *humidification chamber* sampai batas yang telah ditentukan
- 9. Petugas menggantungkan CPAP generator ditiang bawah.
- 10. Petugas mengisi CPAP generator dengan air sampai air melewati overflow container dengan menggunakan corong. Pilih tekanan CPAP yang dikehendaki dengan mengatur ketinggian CPAP Probe
- Petugas memasang breathing sircuit, selang inspirasi terhubung ke chamber humidification dan selang ekpirasi terhubung ke CPAP generator

Email: rsintanhusada@gmail.com

